Bantam

Assis + Debout + Allongé Un verticalisateur unique





EasyStandi

Bantam

Taille extra petit, petit et moyen

Grâce à son système ingénieux multi-position, le Bantam offre l'unique possibilité de changer de posture suivant les besoins: assis-debout, assis-allongé, allongé-debout, et vice-versa.

L'EasyStand Bantam a été conçu pour offrir quotidiennement à votre enfant le meilleur de la verticalisation!



Bantam

Position de flexion hanche-genou pour des transferts

- Permet des transferts pivotés en position debout, latéraux de position assise à position assise, position couchée en supination, position couchée avec des transferts de flexion hanche-genou, ou quelque soit la position nécessaire.
- · Compatible avec les lève-personnes.
- Chaque enfant est différent et le Bantam vous propose plusieurs options lors des transferts.

L'amplitude progressive est possible avec une flexion hanche-genou

- Possibilité de partir d'une position de flexion hanche-genou et progressivement amplifier l'extension des membres inférieurs
- En maintenant un étirement soutenu avec une mise en charge au cours de la séance de verticalisation, l'amplitude des mouvements peut s'amplifier au fil du temps chez beaucoup d'enfants.

Support complet de la position assise à la position debout

- La transition assis-debout met à disposition un support corporel complet avec des repose-pieds, des supports genoux (du bord antérieur de l'assise), une assise (postérieure) et un coussinet thoracique (antérieur) qui soutient l'individu dans toutes les positions : assis, couché et debout.
- Les enfants semblent s'adapter plus vite à la position debout et au fait de porter une charge lorsqu'ils utilisent un appareil assis-debout (verticalisateur) et ce grâce au support supplémentaire qui accroit la sécurité.

Gestion des contractures

- Les multiples réglages du Bantam rendent possible la verticalisation des enfants avec des problèmes de positionnement.
- Il n'y a pas besoin d'effectuer des modifications notables afin d'accueillir des enfants qui souffrent des contractures.
- La surface du Bantam correspond parfaitement à la flexion du genou et de la hanche de l'enfant et peut être modifiée en corrélation avec la progression de l'amplitude des mouvements de ces derniers.

points forts

La position entièrement debout

- La position debout est une position naturelle avec la tête, les hanches, les genoux et les chevilles tout en alignement vertical.
- Quand un enfant se tient en position debout, il a tendance à se sentir plus en équilibre et se trouve en position optimale pour permettre aux muscles du cou de se renforcer.
- L'option d'aller facilement d'une position verticale à une position en supination encourage des périodes plus longues en position debout.

Customisé pour une meilleure verticalisation

- Le Bantam possède une structure modulable qui fonctionne aussi bien pour les enfants qui nécessitent un positionnement minimal que pour les enfants qui nécessitent un positionnement et un support maximal.
- De la tête aux pieds, le Bantam possède plus de 50 options de positionnement et support qui, même dans les cas les plus complexes, assurent la sécurité, l'alignement et la stabilité de l'individu.

Les capacités d'une chaise de positionnement

- Peut effectuer un positionnement en inclinaison antérieure, bascule en arrière, et une vraie déclinaison complète.
- Fournit un support et une stabilité formidable du pelvis en sécurisant l'enfant dans l'assise avec l'aide des supports genoux, des cales-hanches, des ceintures de sécurité et plusieurs options de support pour le haut du corps.
- Une fois que l'enfant est installé dans le Bantam, il peut s'en servir pour se positionner toute la journée. Plus de changements de position avec moins de transferts permet un risque moins important de blessures pour l'individu qui s'occupe de l'enfant.

Possibilités d'une chaise pour manger

- Être en position assise n'est souvent pas la meilleure position pour une maitrise complète de la tête lorsque l'enfant mange et le fait de trouver la bonne position nécessite parfois plusieurs réglages.
- Le Bantam met à disposition plusieurs positions comme la position assise, inclinée, déclive et debout afin de trouver la position optimale pour manger.



Bantam

Taille extra petit, petit et moyen









L'inclusion à l'école et à la maison

- L'enfant peut se tenir debout quand les autres sont debout, s'asseoir quand les autres sont assis et le verticalisateur est compatible avec les tables et le tableau de classe ou avec d'autres outils éducatifs.
- Peut aussi servir de chaise à manger, de positionnement ou d'activités à l'école comme à la maison
- La tablette suiveuse multi-réglages et escamotable est une surface parfaite pour jouer, travailler, communiquer, se nourrir et pour les activités sensorielles.

Beaucoup de possibilités d'évolution

- Les trois tailles du Bantam ont, incorporées dans leur structure, de la place pour une évolution importante. Aucun besoin d'acheter des pièces supplémen taires et les modifications s'effectuent sans outils.
- Le Bantam extra small possède une marge de 30cm de croissance verticale.
 Le Bantam small ainsi que le Bantam medium possèdent chacun une marge de 46cm de croissance verticale.

Promouvoir l'activité physique

- · Idéal pour garder un enfant en mouvement toute la journée.
- Une infinité de positions possibles pour rendre plus facile et plus confortable les activités du jour.
- Avoir la possibilité de changer plusieurs fois la position avec un seul et même produit peut éventuellement amener des conséquences bénéfiques pour la santé, la croissance cognitive et l'équilibre.

Bantam extra petiti/petit motifs des revêtements hygiéniques







SEA CREATURES



FANCY PANTS ELEPHANTS



SPACE RACE



ALL SMILES ANIMALS



FEATHERS IN FLIGHT



Bantam extra petit/petit coloris de châssis









VERT	VIOLET	BLANC	ORANGE	
Charactéristiques techniques	Bantam extra petit	Bantam petit	Bantam moyen	
Poids max.	23kg	45kg	91kg	
Taille min Taille max.	71-102cm	91-137cm	122-168cm	
Hauteur assise/repose-pied	11-42cm	11-42cm	18-47cm	
Profondeur de l'assise	18-30cm)	28-41cm	38-51cm	
Hauteur d'assise à partir du se	ol 48cm	48cm	56cm	
Profondeur des support-geno	ux 6-22cm	6-22cm	8-20cm	
Poids de l'unité de base	24kg	24kg	49kg	
Embase cadre	62x93cm	62x93cm	62x113cm	
Angle de positionnement en supination 0-90° 0-90° 0-90°			0-90°	

additional specifications at easystand.com

Profondeur de l'assise (A):

Mesurer derrière le genou jusqu'au postérieur

Hauteur du genou jusqu'au talon (B):

Mesurer entre le pied etet flexion du genou



Bantam extra petit

Options



EasyStand Bantam extra petit comporte: des repose-pieds, des support-genoux, un lift par vérin à gaz, une assise plane et un dossier standard, un jeu de quatre roulettes, dont deux à l'arrière pivotantes avec système de blocage, et un harnais de maintien, et un choix de couleurs de châssis vert, orange, violet, ou blanc.



PT50234 Fonction plan inclinable

Cette fonction permet le passage de la station debout en extension en position allongée sans passer par la station assise. L'enfant peut être installé dans le verticalisateur en position allongée ou assise. L'enfant peut se verticaliser à partir de la position allongée ou assise.



PNG50499 Réglage facile de siège

Réglage plus facile du profondeur de la



PT50236 Double commande à la main ou

Allows both foot and hand control of the gas spring lift. Must order Push Handle PT50280.



PA5614 Blocage du vérin

Bouton pour verrouiller n'import quel position pour la sécurité à l'école, à la maison etc.



PT50022 Lift électrique

Verticalise l'enfant plus facilement, sans acoup. Il comprend un vérin de type LINAK controller par télécommande, une batterie et un chargeur. Ce système est équipé d'un mécanisme d'arrêt d'urgence. Cette option remplace le vérin à gaz.



PT50020 Lift à pompe hydraulique, manette amovible

Assure une transition autonome vers la station debout ainsi qu'un positionnement précis par l'utilisation de la manette de pompe. La manette est réglable et amovible. (Remplace le lift à ressorts à gaz).



PNG50044 Poignée multiprises

Vient en ajonction sur le levier de pompage. Elle offre plus de possibilités pour une meilleure préhension. Ce système nécessite le levier de pompage.



Cales pieds

15x7.5cm 19.5x8.25cm (standard) 24.7x10cm



Support-genoux (largeur de découpage)

6.3 cm 8.3 cm (standard) 10.8 cm



Hauteur du dossier (de la siège)

30-33cm (standard) 38-43cm



PNG50070 Poignée en

Permet une meilleure accessibilité au levier de pompage pour l'utilisateur aux amplitudes articulaires limités. Cette extension raioute 15cm de part et d'autre du levier. Ce système nécessite le levier de



PT50116 Roulettes Avant Pivotantes

Permettent de faciliter le déplacement de l'appareil, en remplacemant des roulettes uni-directionnelles. Embase cadre avec roulettes pivotantes est 76x97cm. Celles ne sont pas disponible avec l'option manuel actif.



PT50150 Manuel Actif PT50177 Manuel Actif Grand

Permet autopropulsion en position assise ou debout. Mains courantes sont réglable en avant et arrière. Enbase cadre 61x97cm. Hauteur des mains courantes 79cm/89cm à partir du sol. Ne peut être combinée avec Fonction plan inclincable, roulettes avants.



PT50246 Tablette suiveuse manuel actif

PT50204 Tablette suiveuse simple

28x48cm.

et amovible

Apporte maintien et stabilité pour

l'utilisateur lors du passage en station

debout. Cette tablette est réglable en

profondeur, et en hauteur. Dimensions:

PA5600 Tablette suiveuse escamontable

deux côtés, apporte maintien et stabilité

en profondeur, en hauteur et inclinaison.

Dimensions: 28x48cm.

Apporte maintien et stabilité pour l'utilisateur lors du passage en station debout pour l'option manuel actif. Réglable en profondeur et en hauteur. Dimensions: 10x31cm.



PT50074 Tablette suiveuse amovible

Apporte maintien et stabilité pour l'utilisateur lors dupassage en station debout. Cette tablette est réglable en profondeur, en hauteur et inclinaison. Dimensions: 53x61cm.



PT50076 ablette suiveuse amovible grande et transparente

Apporte maintien et stabilité pour l'utilisateur lors dupassage en station debout. Cette tablette est réglable en profondeur, en hauteur et inclinaison. Dimensions: 53x61cm.



PNG50042 Poignées de maitien

Poignées de maintien amovibles avec fixation par ventouse. Elles permettent une meilleure stabilisation du tronc. Elles se combinent uniquement avec une tablette transparente.



PT50156 Coudière - découpage 23.5 cm PT50160 Coudière - découpage 28 cm

Support matelassée pour les tablettes grandes de 53x61cm. Largeur 55cm. profondeur 10cm.



PA5604 Coudières séparés-Tablette noir PA5606 Coudières séparés-Tablette transparente

Coudières séparés réglable en angle lateral, pour les tablettes de 28x48cm.



PA3038 Revêtement hygiénique-Tablette 28x48cm PT30093 Revêtement hygiénique-Tablette 53x61cm

Revêtement hygiénique matelassée pour les tablettes. Enlevable et lavable. Un choix de 6 motifs.



pour l'utilisateur. Cette tablette est réglable

PT50252 Repose-pieds multi-réglables

Sont réalables en hauteur avec un réalage avant-arrière de 2cm, 20° en flexion et en extension ainsi qu'une rotation de 30°.



PT50080 Sangle de maintien du pied 25.5cm PY5636 Sangle de maintien du pied 38cm

Le réglage Velcro® maintient les pieds dans alignement avec plusieurs positions de fixation pour un positionnement correct du pied.



PT50216 Cale-tronc et support-bras combinaison

Un cale-tronc qui apporte un maintien des bras dans le position plan inclinable. Réglable en largeur 20-30cm. Uniquement en combinaison avec un dossier plat.



PT50062 Appui-tête 13 x 20cm PT50064 Appui-tête 15 x 25cm

Appui-tête 13 x 20cm et 15 x 25cm réglable en profondeur +2 à 7 du dossier Hauteur max. Du dossier est 25cm.



PT50082 Double sangle de maintien 25cm PY5638 Double sangle de maintien 38cm

Le réglage Velcro® doublé maintient les pieds dans alignement avec plusieurs positions de fixation pour un positionnement correct du pied.



PT50218 Cale-tronc, support-bras et accoudoir combinaison

Un cale-tronc et accoudoir qui apporte un maintien des bras dans le position plan inclinable et debout. Réglable en largeur 20-30cm. Uniquement en combinaison avec un dossier plat.



PT50284 Appui-tête incurvé

Appui-tête 13 x 25cm réglable en profondeur 6 à 4cm du dossier Hauteur max. Du dossier est 25cm.



PT50264 Support-genoux multi-réglables

Fixation escamontable pour faciliter les transferts. Ils sont réglables en pivotant, en hauteur +/-1.3cm, en largeur 14-25cm et en profondeur 6-20cm.



PT50220 Support-bras et accoudoir

Support-bras et accoudoir facilite le transfert et apport un mantien dans la position debout. Réglable en largeur 20-30cm. Compatible avec tous dossiers Bantam.



PA3035/PA3036 Revêtement hygiénique PA3037 Revêtement hygiénique

Revêtement hygiénique pour l'appui-tête Enlevable et lavable. Un choix de 6 motifs.



PT50044 Assise incurvée

Système de positionnement à mousse visco. Cette assise confortable apporte un maintien réglable des hanches. Dimensions: 22-24x24cm



PT50052 Dossier incurvé 28-33cm PT50240 Dossier incurvé 38-43cm

Dossier incurvé en mousse visco pour plus de confort et stabilité du tronc. Ce système est réglable en hauteur.



PT50280 Poignée de poussette

Poignée de poussette pour déplacer le Bantam facilement.



PT30082 Revêtement hygiénique PT30083 Revêtement hygiénique

Revêtement hygiénique pour Assise incurvée. Enlevable et lavable. Un choix de 6 motifs



PT30078 Revêtement hygiénique PT30089 Revêtement hygiénique

Revêtement hygiénique pour dossier plat 28-33cm et 38-43cm. Enlevable et lavable. Un choix de 6 motifs.



P80809 Trousse pour les outils

Permet le rangement des outils de montage du verticalisateur. Les outils ne sont pas compris.



PT50098 Cale-hanche

Pour encore plus de maintien et correction latérale au niveau du bassin, réglables en largeur de 15 à 23cm avec une plage de réglage de 5cm en hauteur. Cale est 9x9cm. Uniquement en combinaison avec l'assise plane.



PT30079 Revêtement hygiénique PT50052 PT30090 Revêtement hygiénique PT50240

Revêtement hygiénique pour dossier incurvé PT50052 et revêtement hygiénique pour dossier incurvé PT50240 Enlevable et lavable. Un choix de 6 motifs.



P80246 Localisateur de position

Permet de mesurer l'angle de verticalisation avec précision.



PT50278 Cale-mollet

Apporte un maintien des jambes dans le position plan inclinable. Cale est 10x34cm.



PT30066 Sangle de maintien fémorale 58cm PT30094 Sangle de maintien fémorale 89cm

Cette sangle se ferme par velcro. Elle est réglable jusqu'à 58cm de circonférence et 74cm. Largeur 5cm.



PT50008 Cale-tronc-incurvé PT50274 Cale-tronc-plat

Pour encore plus de maintien et correction latérale au niveau du tronc, réglables en largeur de 20 à 30cm. Cale incurvé est 10x15cm. Cale plat est 10x16cm. Uniquement en combinaison avec un dossier plat.



PT50086 Harnais de positionnement 24x23cm PT50088 Harnais de positionnement 28x24cm

Système réglable en néoprène, légèrement élastique pour plus de confort sans compromettre le maintien. Dimensions 24x23cm et 28x24cm.



PT50248 Cale-tronc-incurvé PT50276 Cale-tronc-plat

Pour encore plus de maintien et correction latérale au niveau du tronc, réglables en largeur de 13 à 23cm. Cale incurvé est 10x15cm. Cale plat est 10x16cm. Uniquement en combinaison avec un dossier plat.



PT50128 Fixation de harnais mulit-hauteur

Fixation pour changer le hauteur du harnais pour bien positionner les épaules d'un enfant.

Bantam petit

Options



EasyStand Bantam petit comporte: des repose-pieds, des support-genoux, un lift par vérin à gaz, une assise plane et un dossier standard, un jeu de quatre roulettes, dont deux à l'arrière pivotantes avec système de blocage, et un harnais de maintien, et un choix de couleurs de châssis vert, orange, violet, ou blanc.



Cales pieds

19.5x8.2cm (standard) 25x10cm 30x13cm



Support-genoux (largeur de découpage)

8cm 11cm (standard) 13cm



Hauteur du dossier (de la siège)

35-40cm (standard) 46-51cm



PT50234 Fonction plan inclinable

Cette fonction permet le passage de la station debout en extension en position allongée sans passer par la station assise. L'enfant peut être installé dans le verticalisateur en position allongée ou assise. L'enfant peut se verticaliser à partir de la position allongée ou assise.



PNG50070 Poignée en

Permet une meilleure accessibilité au levier de pompage pour l'utilisateur aux amplitudes articulaires limités. Cette extension rajoute 15cm de part et d'autre du levier. Ce système nécessite le levier de pompage.



PT50074 Tablette suiveuse amovible grande

Apporte maintien et stabilité pour l'utilisateur lors dupassage en station debout. Cette tablette est réglable en profondeur, en hauteur et inclinaison. Dimensions: 53x61cm.



PNG50499 Réglage facile de siège

Réglage plus facile du profondeur de la siège.



PT50116 Roulettes avant pivotantes

Permettent de faciliter le déplacement de l'appareil, en remplacemant des roulettes uni-directionnelles. Embase cadre avec roulettes pivotantes est 76x97cm. Celles ne sont pas disponible avec l'option manuel actif.



PT50076 ablette suiveuse amovible grande et transparente

Apporte maintien et stabilité pour l'utilisateur lors dupassage en station debout. Cette tablette est réglable en profondeur, en hauteur et inclinaison. Dimensions: 53x61cm.



PT50236 Double commande à la main ou au pied

Allows both foot and hand control of the gas spring lift. Must order Push Handle PT50280.



PT50150 Manuel Actif PT50177 Manuel Actif Grand

Permet autopropulsion en position assise ou debout. Mains courantes sont réglable en avant et arrière. Enbase cadre 61x97cm. Hauteur des mains courantes 79cm/89cm à partir du sol. Ne peut être combinée avec Fonction plan inclincable. roulettes avants.



PNG50042 Poignées de maitien

Poignées de maintien amovibles avec fixation par ventouse. Elles permettent une meilleure stabilisation du tronc. Elles se combinent uniquement avec une tablette transparente.



PA5614 Blocage du vérin

Bouton pour verrouiller n'import quel position pour la sécurité à l'école, à la maison etc.



PT50246 Tablette suiveuse manuel actif

Apporte maintien et stabilité pour l'utilisateur lors du passage en station debout pour l'option manuel actif. Réglable en profondeur et en hauteur. Dimensions: 10x31cm.



PT50156 Coudière - découpage 23.5 cm PT50160 Coudière - découpage 28 cm Support matelassée pour les tablettes

Support matelassée pour les tablettes grandes de 53x61cm. Largeur 55cm, profondeur 10cm.



PT50022 Lift électrique

Verticalise l'enfant plus facilement, sans acoup. Il comprend un vérin de type LINAK controller par télécommande, une batterie et un chargeur. Ce système est équipé d'un mécanisme d'arrêt d'urgence. Cette option remplace le vérin à gaz.



PT50204 Tablette suiveuse simple

Apporte maintien et stabilité pour l'utilisateur lors du passage en station debout. Cette tablette est réglable en profondeur, et en hauteur. Dimensions : 28x48cm.



PA5604 Coudières séparés-Tablette noir PA5606 Coudières séparés-Tablette transparente

Coudières séparés réglable en angle lateral, pour les tablettes de 28x48cm.



PT50020 Vérin hydraulique - manette

Verticalise l'enfant plus facilement, sans acoup. Il comprend un vérin de type LINAK controller par télécommande, une batterie et un chargeur. Ce système est équipé d'un mécanisme d'arrêt d'urgence. Cette option remplace le vérin à gaz.



PA5600 Tablette suiveuse escamontable et amovible

Tablette escamontable des deux côtés, apporte maintien et stabilité pour l'utilisateur. Cette tablette est réglable en profondeur, en hauteur et inclinaison. Dimensions : 28x48cm.



PA3038 Revêtement hygiénique-Tablette 28x48cm PT30093 Revêtement hygiénique-Tablette 53x61cm

Revêtement hygiénique matelassée pour les tablettes. Enlevable et lavable. Un choix de 6 motifs.



PNG50044 Poignée multiprises

Vient en ajonction sur le levier de pompage. Elle offre plus de possibilités pour une meilleure préhension. Ce système nécessite le levier de pompage.



PA5602 Tablette suiveuse escamontable et amovible transparente

Tablette escamontable transparente des deux côtés, apporte maintien et stabilité pour l'utilisateur. Cette tablette est réglable en profondeur, en hauteur et inclinaison. Dimensions: 28x48cm.



PT50252 Repose-pieds multi-réglables

Ils sont réglables en hauteur avec un réglage avant-arrière de 2cm, 20° en flexion et en extension ainsi qu'une rotation de 30°.



PT50080 Sangle de maintien du pied 25.5cm PY5636 Sangle de maintien du pied 38cm Le réglage Velcro® maintient les pieds dans alignement avec plusieurs positions de fixation pour un positionnement correct



combinaison

Un cale-tronc qui apporte un maintien des bras dans le position plan inclinable.
Réglable en largeur 20-30cm. Uniquement

PT50216 Cale-tronc et support-bras



PT50064 Appui-tête 15 x 25cm

Appui-tête 13 x 20cm et 15 x 25cm
réglable en profondeur +2 à 7 du dossier
Hauteur max. Du dossier est 25cm.

PT50062 Appui-tête 13 x 20cm



PT50082 Double sangle de maintien 25cm PY5638 Double sangle de maintien 38cm

Le réglage Velcro® doublé maintient les pieds dans alignement avec plusieurs positions de fixation pour un positionnement correct du pied.



PT50218 Cale-tronc, support-bras et accoudoir combinaison

en combinaison avec un dossier plat.

Un cale-tronc et accoudoir qui apporte un maintien des bras dans le position plan inclinable et debout. Réglable en largeur 20-30cm. Uniquement en combinaison avec un dossier plat.



PT50284 Appui-tête incurvé

Appui-tête 13 x 25cm réglable en profondeur 6 à 4cm du dossier Hauteur max. Du dossier est 25cm.



PT50264 Support-genoux multi-réglables

Fixation escamontable pour faciliter les transferts. Ils sont réglables en pivotant, en hauteur +/- .3cm, en largeur 14-25cm et en profondeur 6-20cm.



PT50220 Support-bras et accoudoir

Support-bras et accoudoir facilite le transfert et apport un mantien dans la position debout. Réglable en largeur 20-30cm. Compatible avec tous dossiers Bantam.



PA3035/PA3036 Revêtement hygiénique PA3037 Revêtement hygiénique

Revêtement hygiénique pour l'appui-tête Enlevable et lavable. Un choix de 6 motifs.



PT50048 Assise incurvée

Système de positionnement à mousse visco. Cette assise confortable apporte un maintien réglable des hanches. Dimensions: 28-33x36cm.



PT50056 Dossier incurvé 32-37cm PT50244 Dossier incurvé 42-47cm

Dossier incurvé en mousse visco pour plus de confort et stabilité du tronc. Ce système est réalable en hauteur.



PT50280 Poignée de poussette

Poignée de poussette pour déplacer le Bantam facilement.



PT30084 Revêtement hygiénique PT30085 Revêtement hygiénique

Revêtement hygiénique pour Assise incurvée. Enlevable et lavable. Un choix de 6 motifs.



PT30080 Revêtement hygiénique PT30091 Revêtement hygiénique

Revêtement hygiénique pour dossier plat 36-41cm et 46-51cm. Enlevable et lavable. Un choix de 6 motifs.



P80809 Trousse pour les outils

Permet le rangement des outils de montage du verticalisateur. Les outils ne sont pas compris.



PT50007 Cale-hanche

Pour encore plus de maintien et correction latérale au niveau du bassin, réglables en largeur de 20 à 30cm avec une plage de réglage de 5cm en hauteur. Cale est 9x9cm .Uniquement en combinaison avec l'assise plane.



PT30081 Revêtement hygiénique pour PT50056 PT30092 Revêtement hygiénique pour PT50244

Revêtement hygiénique pour dossier incurvé Enlevable et lavable. Un choix de 6 motifs.



P80246 Localisateur de position

Permet de mesurer l'angle de verticalisation avec précision.



PT50278 Cale-mollet

Apporte un maintien des jambes dans le position plan inclinable. Cale est 10x34cm.



PT30066 Sangle de maintien fémorale 58cm PT30094 Sangle de maintien fémorale 89cm

Cette sangle se ferme par velcro. Elle est réglable jusqu'à 74cm de circonférence et 99cm. Largeur 5cm.



PT50008 Cale-tronc-incurvé PT50274 Cale-tronc-plat

Pour encore plus de maintien et correction latérale au niveau du tronc, réglables en largeur de 20 à 30cm. Cale incurvé est 10x15cm. Cale plat est 10x16cm. Uniquement en combinaison avec un dossier plat.



PT50086 Hamais de positionnement 24x23cm PT50088 Hamais de positionnement 28x24cm

Système réglable en néoprène, légèrement élastique pour plus de confort sans compromettre le maintien. Dimensions: 24x23cm et 28x24cm.



PT50248 Cale-tronc-incurvé PT50276 Cale-tronc-plat

Pour encore plus de maintien et correction latérale au niveau du tronc, réglables en largeur de 13 à 23cm. Cale incurvé est 10x15cm. Cale plat est 10x16cm. Uniquement en combinaison avec un dossier plat.



PT50128 Fixation de harnais mulit-hauteur

Fixation pour changer le hauteur du harnais pour bien positionner les épaules d'un enfant.

Bantam moyen

Options

EasyStand Bantam moyen comporte: un jeu de guatre roulettes, dont deux à l'arrière pivotantes avec système de blocage, vérin hydraulique, assise plat, les support-genoux, repose-pieds réglables en hauteur, châssis bleu. (nécessite un dossier et une tablette)



Foot Holder Sizes 7.75"Lx3.25"W 9.75"Lx4"W 11.75"Lx5"W (base model)




Knee Pad Sizes (inside width) 14cm standard



PY5554 Fonction plan inclinable

Cette fonction permet le passage de la station debout en extension en position allongée sans passer par la station assise. L'enfant peut être installé dans le verticalisateur en position allongée ou assise. L'enfant peut se verticaliser à partir de la position allongée ou assise.

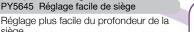



PY5604 Tablette suivante noire

Tablette suiveuse amovible apporte maintien et stabilité pour l'utilisateur lors dupassage en station debout. Cette tablette est réglable en profondeur, en hauteur et inclinaison. Dimensions: 53x61cm.



PY5582 Coudière-découpage 33cm

Support matelassée pour les tablettes. Largeur 55cm, profondeur 10cm. Largeur de la découpage 33cm.

67

22

91 kg





PY5606 Tablette suivante transparente

Tablette suiveuse amovible apporte maintien et stabilité pour l'utilisateur lors dupassage en station debout. Cette tablette est réglable en profondeur, en hauteur et inclinaison. Dimensions: 53x61cm.



PNG30000 Coussin de contre-appui pectoral grand

Vient en remplacement du coussin standard. Forme ovale, dimensions: 24x38cm (pas de coibinaison possible avec une coudière').



PY5568 Roulettes avant pivotantes

Permettent de faciliter le déplacement de l'appareil, en remplacemant des roulettes uni-directionnelles. Embase cadre avec roulettes pivotantes est 72x119cm.



PY5656 Tablette suiveuse noire escamontable

Tablette escamontable des deux côtés. apporte maintien et stabilité pour l'utilisateur. Cette tablette est réglable en profondeur, en hauteur et inclinaison. Dimensions: 53X61cm.



PNG30295 Revêtement hygiénique-Tablette

Revêtement hygiénique matelassée pour les tablettes. Enlevable et lavable. (pas de coibinaison possible avec une coudière').



PY5564 Lift électrique

Verticalise l'enfant plus facilement, sans acoup. Il comprend un vérin de type LINAK controller par télécommande, une batterie et un chargeur. Ce système est équipé d'un mécanisme d'arrêt d'urgence. Cette option remplace le vérin à gaz.



PY5657 Tablette suivante transparente escamontable

Tablette escamontable des deux côtés. apporte maintien et stabilité pour l'utilisateur. Cette tablette est réglable en profondeur, en hauteur et inclinaison. Dimensions: 53X61cm.



PY5586 Repose-pieds multi-réglables

Ils sont réglables en hauteur avec un réglage avant-arrière de 2cm, 20° en flexion et en extension ainsi qu'une rotation de 30°.



PY5632 Vérin hydraulique-manette amovible

Manette amovilble et réglable pour chaque utilisateur.



PNG50042 Poignées de maitien

Poignées de maintien amovibles avec fixation par ventouse. Elles permettent une meilleure stabilisation du tronc. Elles se combinent uniquement avec une tablette transparente.



PY5636 Sangle de maintien du pied -38cm

Velcro® and D-ring adjustment holds feet in alignment with multiple attachment slots for proper foot positioning. Straps measured in length over top of foot, with approximately 1.5" (4cm) of Velcro overlap.



PNG50044 Poignée multiprises

Vient en aionction sur le levier de pompage. Elle offre plus de possibilités pour une meilleure préhension. Ce système nécessite le levier de pompage.



PT50156 Coudière-découpage 23.5cm

Support matelassée pour les tablettes. Largeur 55cm, profondeur 10cm. Largeur de la découpage 23.5cm.



PY5638 Double sangle de maintien du pied-38cm

Velcro® and D-ring adjustment holds feet in alignment with multiple attachment slots for proper foot positioning. Straps measured in length over top of foot, with approximately 1.5" (4cm) of Velcro overlap.



PNG50070 Poignée en

Permet une meilleure accessibilité au levier de pompage pour l'utilisateur aux amplitudes articulaires limités. Cette extension rajoute 15cm de part et d'autre du levier. Ce système nécessite le levier de pompage.



PT50160 Coudière-découpage 28cm

Support matelassée pour les tablettes. Largeur 55cm, profondeur 10cm. Largeur de la découpage 28cm.



PY5600 Support-genoux type Roho

Supportgenoux avec la technologie anti-escarre Roho Dry Flotation. Uniquement disponible en taille 14cm.



PY5596 Support-genoux multi-réglables

Fixation escamontable pour faciliter les transferts. Ils sont réglables en pivotant, en hauteur +/- 8cm, en largeur 13-23cm et en profondeur 8-20cm.



PY3014 Ceinture de positionnement, fermoir à boucle

Facile à mettre, elle apporte encore plus de sécurité lors de la verticalisation. Elle est réglable jusqu'à 168cm de circonférence. Largeur 5cm.



PY5628 Appui-tête 15 x 25cm

Dimensions de coussin 15x25cm. Réglable en hauteur avec dossier plat 41cm: 43-66cm, avec Dossier plat 51cm: 53-76cm. Réglable en profendeur -6 to-4cm du dossier.



PY5570 Assise incurvée 28-33cm

Système de positionnement à mousse visco. Cette assise confortable apporte un maintien réglable des hanches.



PY5620 Ceinture de positionnement pectorale

Permet de stabiliser le tronc pour plus de confort.



PY5630Appui-tête 18x36cm

Dimensions de coussin 18x36cm. Réglable en hauteur avec dossier plat 41cm: 43-66cm, avec Dossier plat 51cm: 53-76cm. Réglable en profendeur -6 to-4cm du dossier.



PY5572 Assise incurvée 30-36cm

Système de positionnement à mousse visco. Cette assise confortable apporte un maintien réglable des hanches.



PY5634 Fixation de harnais mulit-hauteur

Fixation pour changer le hauteur du harnais pour bien positionner les épaules d'un enfant.



PNG50040 Poignées de poussée

Permettent à un tiers de déplacer le verticalisateur facilement.



PY5560 Cale-hanche

Pour encore plus de maintien et correction latérale au niveau du bassin, largeur23-38cm avec réglage du profondeur de 2.5cm. Dimensions de cale; 10x16cm. Il n'est pas disponible pour l'assise incurvée.



PNG30170 Harnais de positionnement croisé

Neoprene®. Dimensions: 24x23cm.



P80809 Trousse pour les outils

Permet le rangement des outils de montage du verticalisateur. Les outils ne sont pas compris.



PY5530 Dossier plat 41cm

Dossier plat est 41 de la siège au haut du dossier.



PNG30056 Hamais de positionnement croisé

Neoprene®. Dimensions: 32x26cm.



PY5643 Localisateur de position

Permet de mesurer l'angle de verticalisation avec précision.



PY5532 Dossier plat 51cm

Dossier plat est 51 de la siège au haut du dossier.



PNG30171 Harnais de positionnement en Y

Neoprene®, Dimensions: 44x29cm,



PY5574 Dossier incurvé 41cm

Dossier incurvé 41 de la siège au haut du dossier



PNG30021 Hamais de positionnement en Y

Neoprene®. Dimensions: 52x32cm.



PY5576 Dossier incurvé 51cm

Dossier incurvé 51 de la siège au haut du dossier.



PY5562 Cale-troncs

Permettent encore plus de stabilité et un recentrage du tronc. Système aux multiples réglages, amovible pour les transferts. Réglable en largeur 23-37cm. Dimensions de cale 10x15cm.



PY3008 Sangle de maintien fémorale

Cette sangle se ferme par velcro. Elle est réglable jusqu'à 168cm de circonférence. Largeur 5cm.



PY5626 Appui-tête - 13x20cm

Dimensions de coussin 13x20cm. Réglable en hauteur avec dossier plat 41cm: 43-66cm, avec Dossier plat 51cm: 53-76cm. Réglable en profendeur -6 to-4cm du dossier.





EasyStandij

Altimate Medical, Inc.

262 West First Street Morton, MN 56270 USA

Tel: 800.342.8968 • 507.697.6393

Fax: 877.342.8968 • 507.697.6900

info@easystand.com • easystand.com

Standing technology should only be used under the guidance of a physician with recommendations for standing program protocol and any medical precautions. Standing programs should be monitored by the attending therapist. AMI maintains a policy of continual product improvement and reserves the right to change features, specifications, and prices without prior notification. Check with AMI for latest information.

FORM BANTAMCAT092617 REV A Copyright © 2017 Altimate Medical, Inc. All rights reserved. Printed in the USA.